

BITTE VOR GEBRAUCH DIE ANLEITUNG SORGFÄLTIG LESEN.

Verwenden Sie diese Anleitung in Verbindung mit Ihrem Antigen-Testkit oder der Anleitung für den PCR-Test.

R H I N O M E D

RHINOSWAB GEBRAUCHS- ANWEISUNG FÜR DIE PROBENENTNAHME

**Ringförmige
Enden**
Werden in die
Nasenlöcher
eingeführt

Bruchkante


Griff
Mit dem
Daumen hier
anfassen

RHINOSWAB
by RHINOMED®

1: REINIGEN SIE IHRE HÄNDE.




**2: NUR DEN GRIFF
BERÜHREN**, während Sie das
Testinstrument aus der Verpackung
entnehmen.

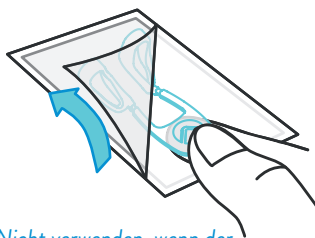


*Nicht verwenden, wenn der
Beutel beschädigt ist*

**3: HALTEN SIE DAS
TESTINSTRUMENT** zwischen Daumen
und Zeigefinger am Griff fest.

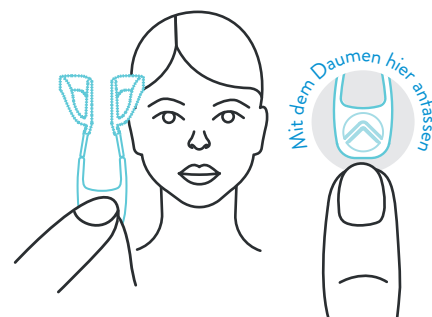

Mit dem Daumen hier anfassen

**4: PLATZIEREN SIE DAS
TESTINSTRUMENT UNTERHALB
IHRER NASE.**

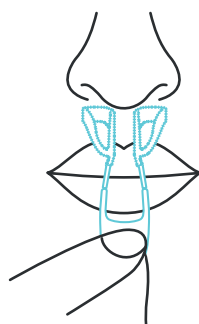

**5: DAS TESTINSTRUMENT IN
DIE NASE EINFÜHREN.**

Platzieren Sie dazu zuerst die
ringförmigen Enden in Ihrer Nase
und schieben Sie dann das
Testinstrument so weit wie
möglich hinein, ohne dass
es sich unangenehm
anföhlt (etwa 2-3 cm
oder 1 Inch). Halten
Sie den Griff
während des
Einführens nach
oben geneigt.



*Der Griff verbleibt
außerhalb der Nase*

**6: STELLEN SIE
DEN TIMER AUF
30 SEKUNDEN**
und atmen Sie
normal durch
die Nase.



*Stellen Sie den
Timer auf
30 SEK. ein*


BITTE WENDEN

7: NACH 15 SEKUNDEN das Testinstrument in der Nase **15 Sekunden lang hin- und herbewegen**. Dabei leichten Druck ausüben, um zu gewährleisten, dass die ringförmigen Enden kontinuierlichen Kontakt mit den inneren Nasenwänden haben.




Aus der Nase entnehmen.

8: DIE RINGFÖRMIGEN ENDEN NACHEINANDER IN DAS RÖHRCHEN ABBRECHEN. Führen Sie ein ringförmiges Ende nach dem anderen in das Röhrchen und brechen Sie es an der Bruchkante ab.

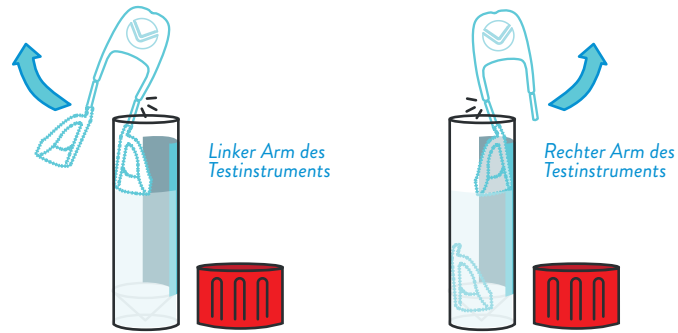

Biegen Sie dazu den Arm des Testinstruments an der Bruchkante gegen den Rand des Röhrchens.

9: DIE VERSCHLUSSKAPPE WIEDER FEST AUF DAS RÖHRCHEN SCHRAUBEN um zu gewährleisten, dass es fest verschlossen ist und keine Flüssigkeit austritt.

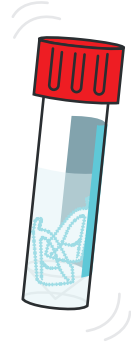

DAS RÖHRCHEN VORSICHTIG MEHRMALS SCHÜTTELN

10: REINIGEN SIE IHRE HÄNDE.



11: TESTVERARBEITUNG.

Bitte befolgen Sie die Anweisungen zur Einsendung der Probe an das zuständige Testzentrum.

Oder lesen Sie die Anweisungen auf dem Antigen-Testkit.

SYMBOL	BEDEUTUNG
	RHINOMED Level 1, 132 Gwynne St, Cremorne VIC 3121 swab@rhinoswab.global
 Zum Patent angemeldet	Medizinprodukt
	Benannte Stelle
	Nicht wiederverwenden
	Vor Sonnenlicht schützen
	Verfallsdatum

SYMBOL	BEDEUTUNG
	Lesen Sie die Gebrauchsanweisung
	Nicht verwenden, wenn Verpackung beschädigt ist
	Eindeutige Geräteerkennung
	Chargennummer
	Nummer im Herstellerkatalog/Kennziffer
	Bevollmächtigter Vertreter in der EU