


PRIMA DI INIZIARE, LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI.

Usare queste istruzioni unitamente alle istruzioni del proprio kit per test antigenico o molecolare.

RHINOMED

RHINOSWAB JUNIOR RACCOLTA DEL CAMPIONE ISTRUZIONI PER L'USO

USARE CON LA GUIDA DI UN ADULTO.

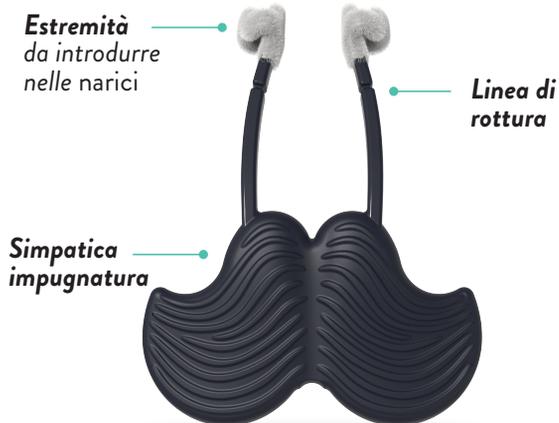


RHINOSWAB
JUNIOR
by RHINOMED®

1: LAVARE O SANIFICARE LE MANI.




2: TOCCANDO SOLO L'IMPUGNATURA, estrarre il tampone dalla confezione.

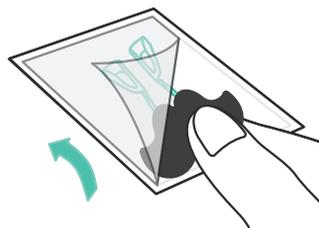


Non utilizzare il prodotto se il sacchetto è danneggiato

3: DIRE AL BAMBINO


di tenere il tampone dall'impugnatura e avvicinarlo al naso.

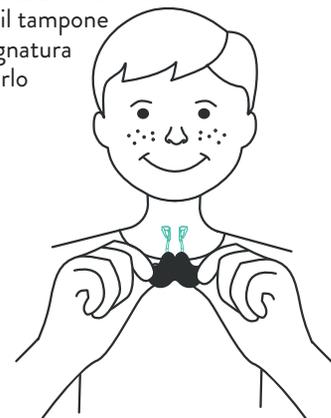

4: IL BAMBINO DEVE INTRODURRE IL TAMPONE delicatamente nel naso a una profondità tale da non provare fastidio.

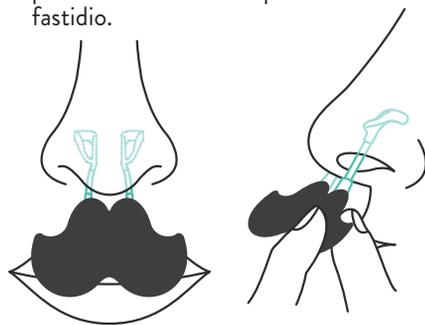

5: IMPOSTARE IL TIMER A 30 SECONDI e dire al bambino di respirare normalmente dal naso.

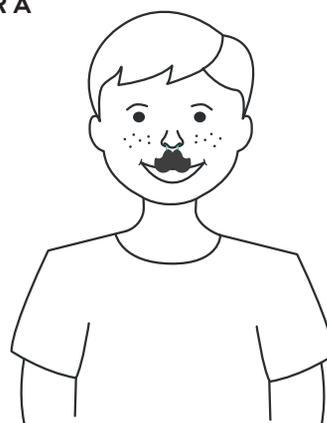

Impostare il timer a 30 SECONDI

7: DOPO 15 SECONDI dire al bambino di muovere il tampone nel naso per **15 secondi** facendo in modo che le estremità siano continuamente in contatto con l'interno delle narici.


Muovere il tampone all'interno del naso
15 secondi



Estrarre dalle narici.


8: DEPOSITARE LE DUE ESTREMITÀ NELLA PROVETTA, UNA ALLA VOLTA.

Introdurre nella provetta un'estremità alla volta e spezzare in corrispondenza della linea di rottura.

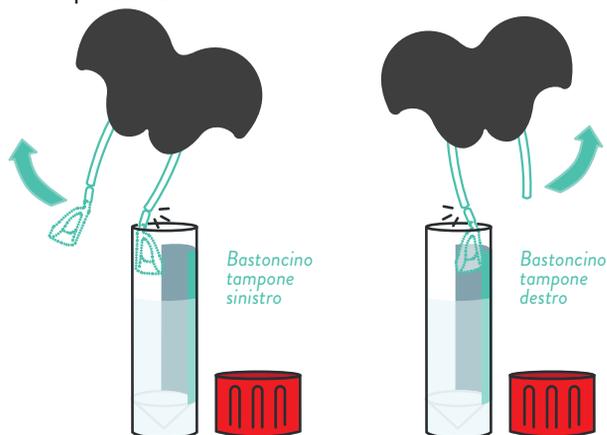

Piegare il bastoncino del tampone sul bordo della provetta in corrispondenza della linea di rottura.

9: RIAVVITARE BENE IL TAPPO SULLA PROVETTA stringendo in modo che il liquido non fuoriesca.

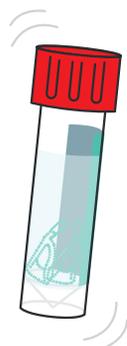

AGITARE DELICATAMENTE LA PROVETTA

10: LAVARE O SANIFICARE LE MANI.



11: PROCEDERE ALL'ANALISI DEL CAMPIONE.

Seguire le istruzioni per sottoporre il campione al laboratorio d'analisi.

Oppure, seguire le istruzioni del kit per test antigenico.

SIMBOLO	LEGENDA
	RHINOMED Level 1, 132 Gwynne St, Cremorne VIC 3121 swab@rhinoswab.global
 Domanda di brevetto depositata	Dispositivo medico
	Organismo notificato
	Non riutilizzare
	Esposizione ai raggi solari
	Scadenza

SIMBOLO	LEGENDA
	Consultare le istruzioni per l'uso
	Non usare se la confezione è danneggiata
	Identificativo unico del dispositivo
	Numero di lotto unico
	Codice di catalogo del produttore
	Rappresentante autorizzato per l'Europa